

# DEPISTAGE du CANCER du COL UTERIN

(Test HPV / CYTOLOGIE cervico-vaginale)

## Prélèvement en milieu liquide

Le prélèvement en milieu liquide permet la réalisation de **test HPV** et/ou d'une cytologie cervico-vaginale dans des conditions optimales (Recommandations HAS du 11 juillet 2019 disponible sur notre site internet <https://pathologie.unilabs.fr> rubrique documents utiles).

## Préparation de la patiente

La réalisation du prélèvement cervico utérin implique, selon l'[ANAES](#), le respect d'un certain nombre de recommandations :

- Le prélèvement doit être effectué à **distance d'une toilette vaginale ou d'un rapport sexuel** (48 heures).
- Il doit être réalisé en dehors des périodes menstruelles, de toute thérapeutique locale (48 heures au moins après la mise en place d'ovules ou de crème vaginale) ou d'infection cervico-vaginale (1 mois après le traitement antibiotique de l'infection).
- Chez la femme ménopausée, un traitement oestrogénique peut être nécessaire au préalable du fait de l'atrophie. D'autre part, la situation anatomique de la zone de jonction varie d'une femme à l'autre et a tendance à ascensionner dans le col avec l'âge.
- Il est préférable de réaliser le prélèvement **en début de cycle**, quand la glaire cervicale est abondante et claire.
- **Il faut éviter d'utiliser un lubrifiant** ou de faire un toucher vaginal avant le prélèvement.
- Avant de faire le prélèvement, le col doit être correctement exposé à l'aide d'un spéculum et débarrassé des sécrétions par un **essuyage doux à l'aide d'une compresse** montée sur une pince longue.

**Le prélèvement doit concerner la totalité de l'orifice cervical externe et interne : exocol + endocol**

## Matériel

### Vérifier les dates de péremption avant utilisation du matériel



Flacon ThinPrep  
fixateur PréservCyt



CervexBrush



CytoBrush



Fiche de demande



Sachet de transport

## Commandes


[commandes.ihcp@unilabs.com](mailto:commandes.ihcp@unilabs.com)

<https://pathologie.unilabs.fr>  
rubrique commande de matériel

☎ 05 57 22 22 81

☎ 05 57 22 22 89

## Instructions de Prélèvement

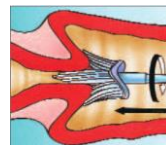

Introduire la zone centrale de la CERVEXbrush dans le canal endocervical de façon à permettre aux zones latérales d'entrer en contact avec la région exocervicale.  
Exercer une légère pression et tourner la brosse 2 tours 1/2 dans le sens des aiguilles d'une montre.



Rincer la brosse dans le flacon de solution PréservCyt  
La presser une dizaine de fois sur le fond du flacon, puis agiter vigoureusement la brosse dans la solution.  
**ELIMINER LA BROSSSE - NE PAS LA LAISSER DANS LE FLACON**



### Visser le flacon hermétiquement

Le trait noir sur le capuchon doit dépasser celui présent sur le flacon



Identifier lisiblement le flacon  
**Nom de naissance- nom marital -prénom-date de naissance**  
Remplir la fiche de demande d'examen  
Identité patiente – préleveur / correspondant – renseignements cliniques



Insérer le prélèvement dans la partie centrale hermétique  
Glisser la fiche de demande d'examen dans la poche kangourou

Stocker l'échantillon à température ambiante (15 à 30°C) jusqu'à transmission. L'échantillon peut être conservé 6 semaines après prélèvement.

### SI STENOSE DU COL

Réaliser un prélèvement complémentaire à l'aide d'une brosse endocervicale CYTOBRUSH  
**dans le même flacon**



Introduire la brosse dans l'endocol jusqu'à ce que seuls les poils de la base soient encore visibles. Faire tourner lentement - 1/4 à 1/2 tour - dans 1 seul sens.



Rincer la brosse de solution PréservCyt dans le même flacon en la faisant tourner 10 fois, en la pressant contre la paroi du flacon, puis agiter vigoureusement la brosse dans la solution pour en libérer le matériel cellulaire résiduel  
**ELIMINER LA BROSSSE - NE PAS LA LAISSER DANS LE FLACON**

Les spatules et brosses utilisées pour le prélèvement doivent être considérées comme des déchets d'activités de soins et éliminées en respectant la réglementation en vigueur

## Auto-prélèvement vaginal (APV)

Le kit d'auto-prélèvement contenant le bon de demande spécifique, les instructions de prélèvement pour la patiente et le matériel est à commander sur notre site internet <https://pathologie.unilabs.fr>

Condition pré-analytique de conservation de l'écouvillon APV :  $\leq 1$  mois à 15-30° C

## Critère du laboratoire en matière d'acceptation ou de rejet des échantillons

A réception au cabinet médical, les points suivants sont vérifiés :

- Concordance des échantillons et documents transmis et reçus
- Nature de l'échantillon
- Respect du délai et des conditions de transmission
- Conformité de l'identification des prélèvements
- Intégrité de l'emballage

L'IHCP se réserve le droit de refuser la réalisation des examens sur des prélèvements non-conformes.

## Techniques

**Test HPV : Automate COBAS 6800 Roche Diagnostics**

**Cytologie en phase liquide (technique monocouche): Processeur ThinPrep® 5000 Autoloader Hologic / scanner ThinPrep imaging system**

**Test CIntec® PLUS: Benchmark Roche Diagnostics**

## Modalités et délais de rendu des résultats

Le résultat est transmis selon les modalités définies dans votre convention de partenariat, après validation définitive (possibilités de transmission : MSSanté, Apicrypt, HPRIM, BIOSERVEUR...)

**Test HPV - dépistage individuel et organisé**

Délai de rendu des résultats\* : 3 jours

HPV + Cytologie reflexe : 7 jours

**Cytologie - dépistage individuel et organisé**

Délai de rendu des résultats\* : 3 jours

HPV secondaire : 2 jours supplémentaires

**Les comptes rendus de cytologie cervico-vaginale sont formulés selon le système BETHESDA 2014**

**Immunomarquage p16/Ki-67 CIntec® PLUS**

Délai de rendu des résultats\* : 3 jours supplémentaires

\* les délais de rendus des résultats sont entendus à réception au cabinet médical

## Réclamations

Le personnel de l'IHCP a pour consigne de prendre en compte et d'enregistrer dans le système Qualité du cabinet médical toutes réclamations ou retours positifs formulés oralement ou par écrit afin de travailler à l'amélioration de la satisfaction des correspondants et de la prise en charge des patients.



## Adresse

Unilabs I.H.C.P  
ZA de Terrefort  
12 avenue de Terrefort CS 50268  
33523 BRUGES

## Horaires d'ouverture

9H00 à 17H00 du lundi au vendredi

## Contact

**Tél Standard : 05 57 22 22 88 – email : [contact.ihcp@unilabs.com](mailto:contact.ihcp@unilabs.com)**

**Liste des examens et guide de prélèvement complet sur <https://pathologie.unilabs.fr> rubrique documents utiles**

## Médecin responsable du secteur Dépistage du Cancer du Col de l'Utérus (DCCU)

|                  |                                  |                                                                          |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dr Olivier RAMUZ | 05 57 22 22 82<br>07 60 59 65 37 | <a href="mailto:olivier.ramuz@unilabs.com">olivier.ramuz@unilabs.com</a> |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## Autres médecins pathologistes

|                         |                                  |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr Henri Pierre SANCHEZ | 05 57 22 22 97<br>06 08 24 88 29 | <a href="mailto:henri-pierre.sanchez@unilabs.com">henri-pierre.sanchez@unilabs.com</a>             |
| Dr Anabelle WERBROUCK   | 05 57 22 22 96<br>06 19 81 19 33 | <a href="mailto:anabelle.werbrouck.chiraux@unilabs.com">anabelle.werbrouck.chiraux@unilabs.com</a> |
| Dr Pierre MELARD        | 05 57 22 22 88<br>06 52 88 33 25 | <a href="mailto:pierre.melard@unilabs.com">pierre.melard@unilabs.com</a>                           |

## Responsable Qualité

|                 |                |                                                                              |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Laëtitia DUBOIS | 05 17 93 03 46 | <a href="mailto:laetitia.dubois@unilabs.com">laetitia.dubois@unilabs.com</a> |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|

## Responsable opérations

|              |                |                                                                        |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Claire SOUPY | 05 57 22 22 94 | <a href="mailto:claire.soupy@unilabs.com">claire.soupy@unilabs.com</a> |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|

## Responsable du service Cytologie

|                |                |                                                                            |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Laura ROUSSEAU | 05 57 22 22 98 | <a href="mailto:cytologie.ihcp@unilabs.com">cytologie.ihcp@unilabs.com</a> |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|

## Commandes de matériel

|         |                |                                                                            |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Magasin | 05 57 22 22 81 | <a href="mailto:commandes.ihcp@unilabs.com">commandes.ihcp@unilabs.com</a> |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|